



REVEAL® Q+ MAX PARA DON

FAVOR LER AS INSTRUÇÕES DO KIT NA INTEGRA ANTES DE REALIZAR O TESTE.

Materiais fornecidos:

- 25 Tiras de teste Reveal Q+ MAX para DON
- 25 Recipientes cônicos vermelhos para a diluição da amostra
- 25 Recipientes transparentes para amostras
- 02 Frascos com rótulo verde de diluente de amostra
- 25 Embalagens de Extração Aquosa MAX 1
- Instruções de uso do kit

Número de producto: 8388

Limite: 0.3-30 ppm


Tempo do teste: 3 minutos

Para comprar, ligue para +1.800.234.5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Coloque o código de barras no leitor Reveal® AccuScan® Gold.

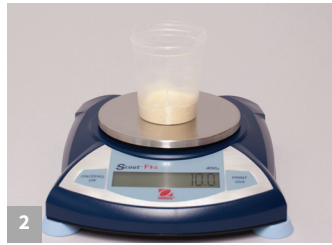

2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese 10 g da amostra.



3 Adicione na amostra o conteúdo de 1 embalagem de MAX 1.




4 Adicione 50 mL de água destilada ou deionizada na amostra.




5 Agite vigorosamente por 3 minutos, ou com um misturador por 1 minuto.




6 Deixe o material decantar e filtre, coletando um mínimo de 3 mL do filtrado.

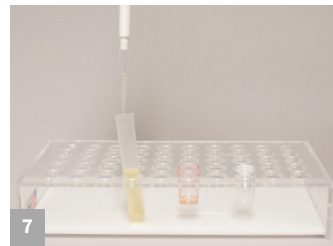

7 Adicione 100 µl do extrato da amostra ao recipiente vermelho.

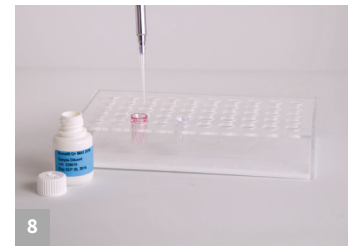

8 Adicione 1000 µl do diluente de amostra ao recipiente vermelho de diluição e misture para cima e para baixo 5 vezes.

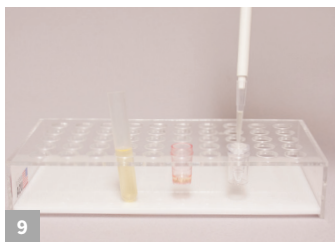


9 Transfira 100 µl do extrato da amostra diluída para um recipiente de amostra.



10 Coloque uma nova tira Reveal Q+ MAX para DON no recipiente de amostra. Ajuste o cronômetro para 3 minutos.



11 Remova imediatamente aos 3 minutos e interprete os resultados utilizando o leitor Reveal AccuScan Gold.

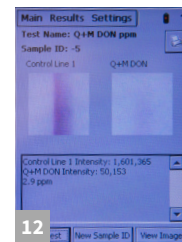

12 Resultados mostrados no AccuScan Gold. Obs: Amostras acima de 6 ppm devem ser diluídas e analisadas novamente.



Para comprar, ligue para +1.800.234.5333 ou
acesse NEOGEN.com

Informações para pedidos

8388 Reveal® Q+ MAX
para DON
AccuScan Gold



Materiais recomendados, porém não fornecidos

Item NEOGEN	Materiais para extração
9428, 9428B	Recipientes para a coleta de amostras com tampa, 125 mL
9421, 9421B	Tubos para a coleta de amostras com tampas
9420, 9429, 9519	Filtro seringa, papel filtro Whatman no 4 ou equivalente
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos para micro centrífuga
9448, 9447	Dispensador automático ou proveta graduada
9401, 9453	Trituradora Agri-Grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5–50 grams ± 0.1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes Reveal
9860, 9290	Pipeta, 100 µL
9407, 9410, 9417	Ponteiras, 1–200 µL
9463	Pipeta, 100–1,000 µL
9464, 9487	Ponteiras, 100–1,000 µL
—	Água destilada o desionizada
8089	Embalagens de extração acuosa MAX 1
8089G	Embalagens de extração acuosa MAX 1–G50

Reveal® Q+ MAX para DON

Extração Acuosa

Número de producto: 8388

Teste com confiança

A NEOGEN® apresenta Reveal® Q+ MAX para DON, um teste de fluxo lateral quantitativo de fácil uso que fornece precisão inigualável em apenas três minutos.

O teste utiliza a nova extração aquosa que permite aos analistas usar uma única extração e analisar qualquer uma das seis micotoxinas, economizando tempo no processo de extração. A tecnologia inovadora do kit para DON oferece resultados precisos e reprodutíveis.

- **Simple**s extração à base de água
- Tempo de resultado **Rápido**
- Armazenamento **Conveniente** à temperatura ambiente

