

Reveal® Q+ para DON

BAIXE E LEIA AS INSTRUÇÕES DO KIT COMPLETAMENTE ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para DON
25 recipientes vermelhos para diluição da amostra
25 recipientes transparentes para amostras
02 frascos com diluente da amostra

Número de produto: 8385

Limite: 0.3–30 ppm

Tempo: 3 minutos

Ligue para +1 800 234 5333 ou acesse Neogen.com

Procedimento



1 Insira o código QR no leitor Raptor®.



2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese 10 g da amostra.




3 Adicione 100 mL de água destilada ou deionizada na amostra.*




4 Agite vigorosamente por 3 minutos, ou misture por 1 minuto.



5 Deixe decantar e filtre coletando um mínimo de 3 mL do filtrado.

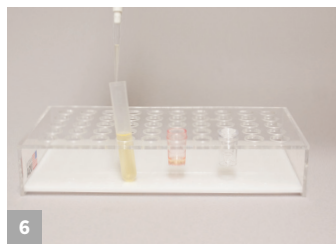


6 Adicione 100 µL do extrato de amostra ao recipiente vermelho de diluição.

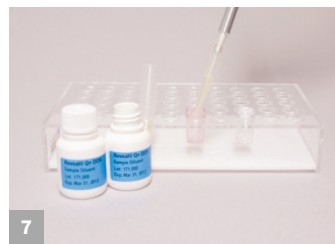

7 Adicione 1000 µL do diluente da amostra ao recipiente vermelho de diluição. misture para cima e para baixo 5 vezes.



8 Insira a tira no suporte Raptor.

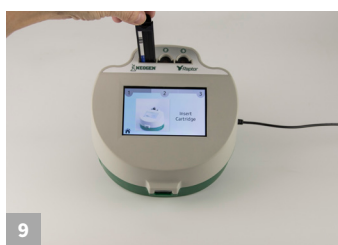

9 Insira o suporte no leitor Raptor.



10 Adicione 400 µL da amostra no recipiente vermelho de diluição na parte de trás do suporte Raptor. O leitor será iniciado automaticamente.



11 Resultados mostrados no leitor Raptor.

*Amostras acima de 6 ppm devem ser diluídas e testadas novamente.



Reveal[®] Q+ para DON


Número de Produto: 8385

Informações para pedidos

8385 Reveal Q+ para DON

9680 Sistema Raptor

9681 Cartuchos Raptor

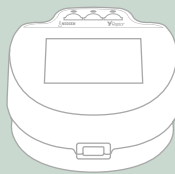

Materiais recomendados, não fornecidos

Neogen #	Item Description
9428, 9428B	Recipientes para coleta de amostra com tampas 125 mL
9421, 9421B	Tubos para coleta de amostra com tampas
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, papel filtro Whatman n° 4 ou equivalente
9330	Mini centrífuga
9172	Tubos para micro centrífuga
9448, 9447	Dispensador automático ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador Agri-Grind ou equivalente
9427	Balança com capacidade de pesar 5–50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes
9463	Pipetador, 100–1000 µL
9464, 9487	Ponteiras, 100–1000 µL
9693	Pipetador, 400 µL
–	Água destilada ou deionizada

Teste com confiança

A Neogen[®] apresenta o Reveal[®] Q+ para DON, um teste de fluxo lateral de fácil uso e com resultados quantitativos, que fornece precisão inigualável em apenas três minutos.

Reveal Q+ para DON é um produto de tecnologia inovadora da Neogen, que produz resultados quantitativos precisos e reproduzíveis.

O leitor Raptor[®] permite ao usuário adicionar uma amostra e ir embora. O instrumento controla o volume, temperatura e tempo do seu ensaio. O sistema permite que você execute três amostras ao mesmo tempo.

- Procedimento simples — apenas adicione a amostra
- Tempo de resultado rápido
- Elimina erros do operador

