

Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou acesse NEOGEN.com

Reveal[®] Q+ MAX para Zearalenona

Extração Aquosa

Número de Producto: 8188

Informações sobre Pedidos

8188 Reveal Q+ MAX
para Zearalenona
9696 Sistema Raptor Solo
9681 Suportes Raptor



Materiais Recomendados, Não Fornecidos

NEOGEN #	Descrição do Item
9428, 9428B	Recipientes para a coleta de amostras com tampas, 125 mL
9421, 9421B	Tubos para a coleta de amostras com tampas
9420, 9429, 9519	Filtro seringa, papel filtro Whatman n° 4 ou equivalente
9330	Mini centrífuga
9172	Tubos para mini centrífuga
9448, 9447	Dispensador automático ou proveta
9401, 9453	Triturador agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5–50 gramas ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte para recipientes Reveal
9463	Pipetador, 100–1,000 µL
9464, 9487	Ponteiras 100–1000 µL
9693	Pipetador, 400 µL
—	Água destilada ou deionizada
8089	Pacotes de extração aquosa MAX 1

Teste com Confiança

A NEOGEN[®] apresenta Reveal[®] Q+ MAX para Zearalenona, um teste de fluxo lateral de fácil uso e com resultados quantitativos, que fornece precisão inigualável em apenas cinco minutos.

O teste utiliza a extração comum MAX, permitindo aos usuários processar um extrato de amostra e testar qualquer uma das seis micotoxinas. A extração aquosa elimina a necessidade de materiais perigosos e sua tecnologia inovadora produz resultados precisos e reproduzíveis.

O leitor Raptor[®] permite ao usuário adicionar uma amostra e ir embora. O instrumento controla o volume, temperatura e tempo do seu ensaio.

- **Simples** extração à base de água
- Tempo de resultado **Rápido**
- Reatividade cruzada **Superior**



REVEAL® Q+ MAX PARA ZEARALENONA

DESCARGUE Y LEA COMPLETO LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



Materiales Fornecidos:

- 25 Tiras de teste Reveal® Q+ MAX para Zearalenona
- 25 Recipientes vermelhos de diluição
- 25 Recipientes transparente de amostra
- 02 Frascos de diluente para amostras com rótulo vermelho
- 01 Frasco de tampão de diluição com rótulo amarelo
- 25 Pacotes de extração aquosa MAX 1

Número de Producto: 8188

Limite: 25–500 ppb (trigo)
50–500 ppb (milho)


Tempo: 5 minutos

Para comprar, ligue para +1 800 234 5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Introduzca el código QR en el lector Raptor® Solo.

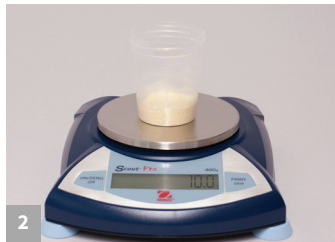

2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.



3 Añada el contenido de un paquete MAX 1 a la muestra.



4 Añada 50 mL de agua destilada o desionizada a la muestra.*



5 Agite vigorosamente por 3 minutos o licue por 1 minuto.



6 Deje reposar, filtre y recolecte un mínimo de 3 mL de filtrado.



7 Añada 250 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo y mezcle hacia arriba y hacia abajo 5 veces.



8 Añada 250 µL de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo y mezcle hacia arriba y hacia abajo 5 veces.




9 Inserte la tira en el cartucho Raptor.



10 Inserte el cartucho en el lector Raptor Solo.



11 Añada 400 µL de muestra del recipiente de dilución rojo a la parte posterior del cartucho Raptor Solo. El lector se iniciará automáticamente.

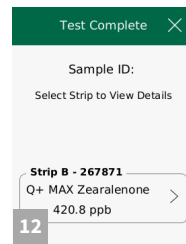

12 Los resultados se muestran en el lector Raptor Solo. *Las muestras superiores a 500 ppb necesitan ser diluidas y analizadas nuevamente.

