

REVEAL® Q+ PARA T-2/HT-2

BAIXE E LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES DO KIT ANTES DE REALIZAR O TESTE.



Materiais fornecidos:

25 tiras de teste Reveal® Q+ para T-2/HT-2
25 frascos vermelhos para diluição de amostra
25 frascos transparentes de amostra
02 frascos de diluente de amostra

Número do produto: 8285

Faixa: 50 a 600 ppb


Tempo de teste: 6 minutos

Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Procedimento



1 Primeiro insira valores no leitor AccuScan® Gold.

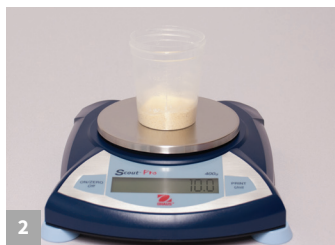

2 Obtenha uma amostra representativa. Triture e pese uma amostra de 10 g.




3 Adicione 100 mL água destilada ou deionizada à amostra.



4 Agite vigorosamente durante 3 minutos ou misture durante 1 minuto.




5 Settle, then filter or centrifuge collecting a minimum of 3 mL filtrate.

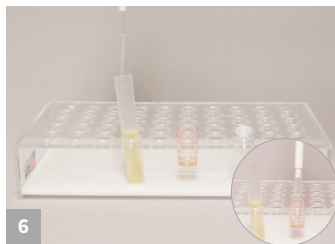

6 Transfira 100 µL para o recipiente vermelho de diluição.



7 Adicione 500 µL do diluente de amostra ao recipiente vermelho de diluição e faça movimentos de inversão do frasco por 5 vezes.

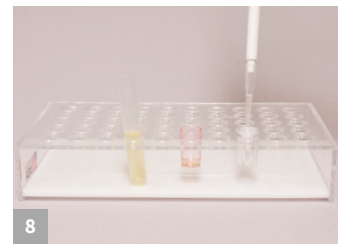


8 Transfira 100 µL do extrato diluído da amostra para um recipiente transparente de amostra.



9 Coloque uma tira nova de Reveal para T-2/HT-2 dentro do recipiente de amostra. Ajuste o cronômetro para 6 minutos.



10 Remova a tira exatamente após 6 minutos e leia resultados com o leitor AccuScan Gold.

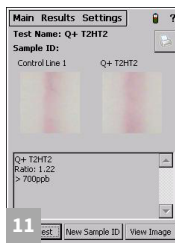

11 Resultados apresentados no leitor AccuScan Gold. Amostras com mais de 600 ppb deverão ser diluídas e testadas novamente.



Para comprar, ligue para +1 (800) 234-5333 ou acesse NEOGEN.com

Reveal® Q+ para T-2/HT-2

Número do Produto: 8285

Informações para Pedidos

8285 Reveal Q+ para T-2/HT-2

AccuScan Gold



Materiais recomendados, não fornecidos

N.º Neogen	Descrição do item
9428, 9428B	Recipientes de 125 mL com tampas para coleta de amostras
9421, 9421B	Tubos de coleta de amostras com tampas
9420, 9429, 9519	Seringas com filtro, papel filtro Whatman nº 4 ou equivalente
9330	Minicentrífuga
9172	Tubos para microcentrífuga
9448, 9447	Bomba de dispensação ou proveta graduada
9401, 9453	Triturador Agri-grind ou equivalente
9427	Balança capaz de pesar 5 a 50 g ± 0,1 g
9426, 9452	Cronômetro
9475	Suporte de recipientes de amostra Reveal
9860, 9290	Pipetador, 100 µL
9407, 9410, 9417	Ponteiras para pipeta 1–200 µL
9336	Pipetador, 500 µL
9464, 9487	Ponteiras para pipeta 200–1000 µL
—	Água destilada ou deionizada

Teste com Confiança

A NEOGEN® apresenta o Reveal® Q+ para T-2/ HT-2, um teste rápido quantitativo em fluxo lateral que é fácil de usar e oferece resultados com precisão inigualável em apenas 6 minutos.

O Reveal Q+ para T-2/HT-2 é uma tecnologia inovadora que produz resultados quantitativos precisos e reproduzíveis.

- Extração **simples** à base de água
- **Rapidez** no tempo até o resultado
- **Conveniência** de armazenamento em temperatura ambiente

