

# REVEAL® Q+ PARA FUMONISINAS

DESCARGUE Y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL KIT ANTES DE REALIZAR LA PRUEBA.



## Materiales incluidos:

25 tiras de prueba Reveal® Q+ para Fumonisinas  
25 recipientes rojos de dilución de muestra  
25 recipientes transparentes de muestra  
01 frasco de diluyente de muestra

**Número de producto: 8885**

**Umbral: 0.3-6 ppm**


**Tiempo de la prueba: 6 minutos**

Llame al +1 (800) 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

## Procedimiento



1 Prepare la prueba ingresando el código QR en el lector Raptor®.

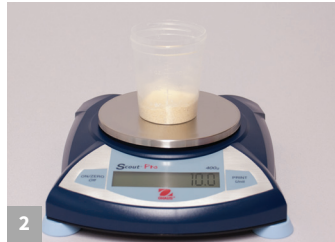

2 Obtenga una muestra representativa. Muela y pese una muestra de 10 g.




3 Agregue 50 mL de etanol al 65% a la muestra.




4 Agite vigorosamente durante 3 minutos o mezcle durante 1 minuto.



5 Permita que se sedimente y después filtre recogiendo un mínimo de 3 mL de filtrado.

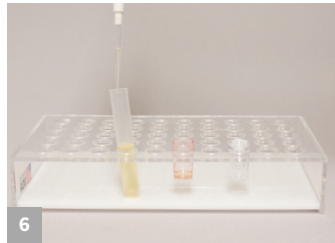

6 Agregue 200 µL de extracto de muestra al recipiente de dilución rojo.

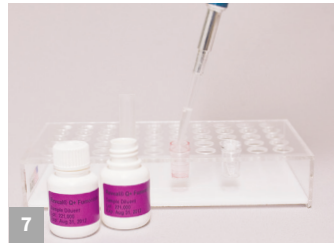

7 Agregue 400 µL de diluyente de muestra al recipiente de dilución rojo y mezcle aspirando y expulsando con una pipeta 5 veces.



8 Inserte la tira en el cartucho Raptor.



9 Inserte el cartucho en el lector Raptor.



10 Añada 400 µL de la muestra del recipiente de dilución rojo a la parte posterior del cartucho Raptor. El lector inicia automáticamente.



11 Los resultados se muestran en el lector Raptor. Nota: las muestras superiores a 6 ppm se deben diluir y volver a evaluar.



Llame al +1 (800) 234 5333 para hacer un pedido o visite [NEOGEN.com](http://NEOGEN.com)

# Reveal<sup>®</sup> Q+ para Fumonisinas

Número de producto: 8885

## Información para hacer pedidos

8885 Reveal Q+  
para Fumonisinas  
9680 Plataforma Raptor  
9681 Cartuchos Raptor



## Materiales recomendados, no incluidos

NEOGEN #	Descripción del artículo
9428 y 9428B	Recipientes de recolección de muestra con tapa, 125 mL
9330	Centrífuga, mini
9172	Tubos para microcentrífuga
9448 y 9447	Bomba de dosificación o probeta graduada
9401 y 9453	Molino agri-grind o equivalente
9427	Balanza capaz de pesar 5-50 g ± 0.1 g
9426 y 9452	Cronómetro
8073 y 8074	Solución de etanol al 65 %
9421 y 9421B	Tubos de recolección de muestra con tapas
9420, 9429, y 9519	Jeringas de filtración con papel filtro Whatman núm. 4 o equivalente
9475	Gradilla para vasos de muestra Reveal
9463	Pipeta automática, 100-1000 µL
9693	Pipeta automática, 400 µL
9464 y 9487	Puntas para pipeta, 100-1000 µL
—	Agua destilada o desionizada

## Prueba con confianza

Reveal<sup>®</sup> Q+ para Fumonisinas de NEOGEN<sup>®</sup> es una prueba cuantitativa de flujo lateral fácil de usar que brinda una precisión sin igual en solo 6 minutos.

El lector Raptor<sup>®</sup> le permite al usuario simplemente agregar muestra y dejar el instrumento trabajando, el cual controla el volumen, la temperatura y el tiempo de ejecución de su análisis. El sistema le permite analizar tres muestras a la vez.

- Procedimiento **simple**, solo agregue muestra
- Resultados **rápidos**
- **Elimine** los errores del operador

